



Fabriqué
au Canada

WASH-CHECKS® U

Dispositif de vérification de nettoyage à ultrasons et support réutilisable

- Vérifie régulièrement l'efficacité du processus de nettoyage de votre nettoyant par ultrasons
- Les souillures d'essai sur le dispositif se dissolvent lorsque les conditions de nettoyage sont efficaces
- Évitez les tests salissants avec du papier aluminium
- Le support en acier inoxydable maintient le dispositif de vérification du nettoyage en place pour des résultats précis*



Facile à comprendre



Non exposé

Le point bleu disparaît lorsque les conditions à ultrasons appropriées sont obtenues.



Réussite

Nettoyage efficace.



Échec

S'il reste du bleu, le nettoyage est inadéquat. Les bonnes conditions à ultrasons n'ont pas été obtenues.



Article n° :
WC-108



Article n° :
WC-108-HOLDER

* Support vendu
séparément

Problèmes courants

- Présence de zones d'ombre
- Cavitation inadéquate
- Mauvaise température
- Temps insuffisant
- Dose inadéquate de détergent
- Mauvaise qualité de l'eau

Test multiparamètres

- Cavitation
- Temps
- Température
- Quantité de détergent
- Nombre d'instruments

Toujours se fier aux instructions du fabricant, aux réglementations nationales et locales et aux exigences de votre organisme de réglementation.

Pour commander Wash-Checks® U ou pour obtenir plus de renseignements, contactez Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

Rév. 01 082025

GERMIPHENE

Une division de Young Innovations



Fabriqué
au Canada


WASH-CHECKS®

Dispositif de vérification jetable de lave-instruments automatique et support réutilisable

- Vérifie régulièrement l'efficacité du processus de nettoyage des instruments dans votre lave-instruments automatique
- Les souillures d'essai sur le dispositif se dissolvent lorsque les conditions de nettoyage sont efficaces
- Le support en acier inoxydable maintient le dispositif de vérification du nettoyage en place pour des résultats précis*



Facile à comprendre

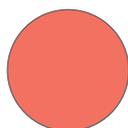


Non exposé

Le point rouge disparaît lorsque les conditions appropriées du cycle du lave-instruments sont obtenues.



Réussite

Nettoyage efficace.

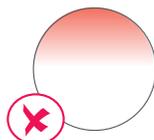

Échec

S'il reste du bleu, le nettoyage est inadéquat. Les bonnes conditions du cycle du lave-instruments n'ont pas été obtenues.



Tracez une marque ou un cercle représentant la position du Wash-Checks sur le rectangle d'emplacement qui simule un panier de lavage imaginaire. Cela permet de suivre la position.



* Support vendu séparément

Problèmes courants

- ✓ Une surcharge du stérilisateur
- ✓ Pulvérisation d'eau et impact inadéquats
- ✓ Bras de lavage obstrués
- ✓ Dose inadéquate de détergent
- ✓ Mauvaise qualité de l'eau

Test multiparamètres

- ✓ Temps ✓ Température
- ✓ Trempage aux enzymes
- ✓ Fonction bras de lavage
- ✓ Concentration de détergent

Toujours se fier aux instructions du fabricant, aux réglementations nationales et locales et aux exigences de votre organisme de réglementation.

Pour commander Wash-Checks® ou pour obtenir plus de renseignements, contactez Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

Rév. 01 082025